



OP-, Untersuchungsleuchten

(Auszug des Lieferprogramms)



+43 1 34242 069256
office@ecomед.co.at
+43 680 12 4747 9
www.ecomed.co.at

... we care about you ...

Als junges Unternehmen mit Sitz in Melk an der Donau, im Laufe des Jahres 2013 gegründet, bieten wir Ihnen dennoch jahrelange Erfahrung im Bereich der Medizintechnik und entsprechender Dienstleistungen.

Unser Know-how und Bestreben nach bester Produkt- und Dienstleistungsqualität kombiniert mit der Flexibilität eines Kleinunternehmens bilden die Basis für eine langjährige Partnerschaft.

Überzeugen Sie sich selbst.

(Einzelne Produkte sind ggf. aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen nicht für den Verkauf in Österreich bestimmt. Selbstverständlich beraten wir Sie aber auch in diesem Fall sehr gerne.)

Dr. Mach
Medical lighting
+ Technology



Mach LED 130

Kompakte Untersuchungsleuchte mit LED-Technologie



ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
... we care about you ...


LED UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN

Untersuchungsleuchten Mach LED 130



Mach LED 130
50.000 Lux

Kompakte Untersuchungsleuchte
mit LED-Technologie
für Diagnose und Prophylaxe


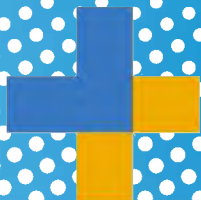


ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
... we care about you ...



Mach LED 130 Decken-Modell

Mach LED 130 Wand-Modell

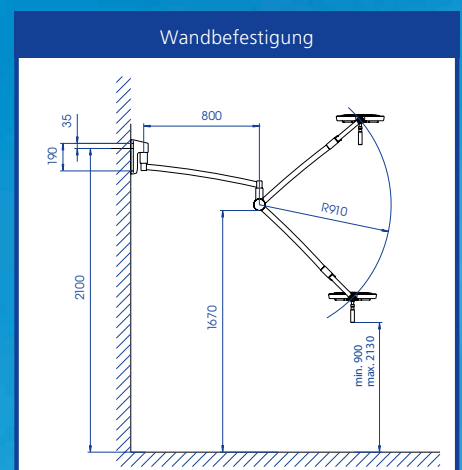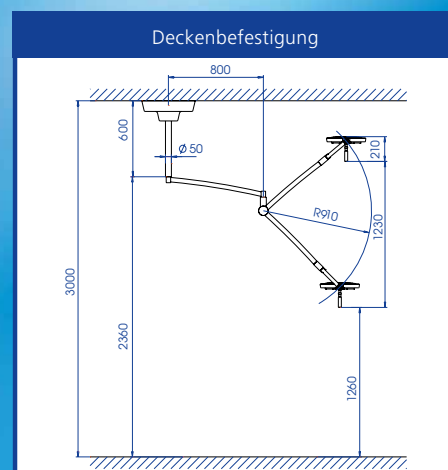


Maßangaben in Millimeter



ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
... we care about you ...


Mach LED 130 Stativ-Modell

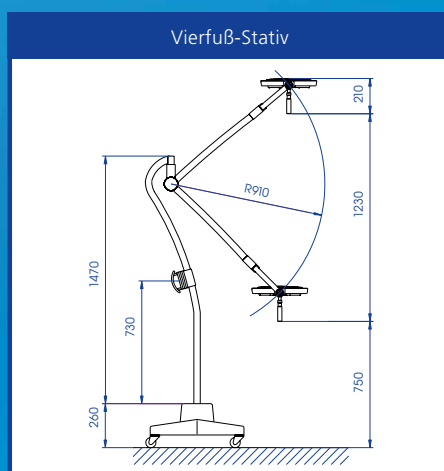

Technische Daten Mach LED 130 (Fixfokus) Lichtsystem

Beleuchtungsstärke Lux in 1 Meter Abstand	50.000
Farbwiedergabeindex $R_a^{(1)}$ bei 4500 Kelvin	95
Fokussierbare Leuchtfeldgröße (in cm)	17
Farbtemperatur (Kelvin)	4500
Elektronische Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper	50 - 100%
Temperaturerhöhung im Kopfbereich	0,5 °C
Leistungsaufnahme gesamt	20 W
Anzahl der LEDs	19
Lebensdauer der Leuchtmittel	> 40.000 h
Arbeitsbereich (in cm)	70 - 140
Leuchtenkörperdurchmesser (in cm)	33
Höhenverstellung (in cm)	119

⁽¹⁾ R_a ist ein Mittelwert aus R_1 = altrosa,
 R_2 = senfgelb, R_3 = gelbgrün,
 R_4 = hellgrün, R_5 = türkisblau,
 R_6 = himmelviolett, R_7 = asterviolett,
 R_8 = fliederviolett. Maximalwert = 100.

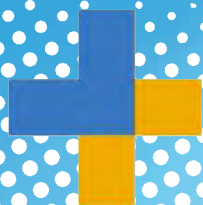

ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
 ...we care about you...

Dr. Mach LED-Technologie



Überragende Farbwiedergabe

Mit überragenden Farbwiedergabewerten von $R_a = 95$ erkennt der Arzt mühelos feinste Farbnuancen im Gewebe.

Das Farbspektrum des Wundfeldes erscheint natürlich und kontrastreich. Zudem wirkt das OP-Licht für das Auge spürbar angenehmer.



Facettiertes Mehrfach-Linsensystem

Die Vielzahl computerberechneter facettierter Linsen gewährleistet Homogenität sowie geringste Schattigkeit im Leuchtfeld. Separat angeordnete Optiken mit je einem LED-Modul erzeugen jeweils ihr eigenes Leuchtfeld. Dies verstärkt die Kontrastwirkung und erhöht damit die Detailerkennung im Wundfeld. Insgesamt wird eine Lichtstärke bis zu 50.000 Lux erreicht.



Bedienpanel am Leuchtengehäuse

Folgende Leuchtenfunktionen können elektronisch geregelt werden:

- Ein-/Ausschaltung
- Elektronische Helligkeitsregulierung



Handling

Bei der Neuentwicklung der LED-Untersuchungsleuchte wurde großer Wert auf einfaches Handling und hohe Wartungsfreundlichkeit gelegt. Zudem lässt die strömungsgünstige offene Ringform keinen Wärmestau im Kopfbereich zu und schafft so optimale Voraussetzungen für Laminar-Flow-Systeme.



Mit dem Handgriff (abgebildeter sterilisierbarer Handgriff als Option gegen Mehrpreis) kann die Leuchte positionsgenau auf das Wundfeld eingestellt werden.



Hohe Lebensdauer/niedriger Stromverbrauch

Die Lebensdauer von mindestens 40.000 Betriebsstunden reduziert um ein Vielfaches die Kosten für den Austausch und Ersatz der bisher verwendeten Halogenlampen. Um teilweise mehr als 50% konnte der Stromverbrauch durch Einsatz der LED-Technik reduziert werden.



Kühles Licht

Im Vergleich zu den herkömmlich eingesetzten Leuchtmitteln (Halogenlampen) ist die LED-Technik um ein Vielfaches effektiver. Die Wärmeabstrahlung wird ohne aufwendige Filtertechnik auf ein Minimum reduziert. Die Erwärmung im Kopfbereich ist nahezu gleich null.



ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
... we care about you ...

Dr. Mach
Medical lighting
+Technology

Mach M2

Kleines OP-Leuchtsystem

Mach M2



ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
...we care about you...

OPERATIONSLEUCHTEN

Mach M2 kleine OP-Leuchte



Handliche kleine OP-Leuchte
mit dem optionalen Vorteil der
Fokussierung



ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
... we care about you ...



Mach M2 mit Kardanbügel (gegen Aufpreis),
Deckenbefestigung



Mach M2 mit Deckenbefestigung
am Zentralfederarm
für Raumhöhe < 2,60 m



Mach M2 mit Wandbefestigung



Mach M2 mit Vierfuß-Stativ
(optional mit Notstromaggregat)

Leistungsmerkmale

Mach M2

Überragende Farbwiedergabe



Facettiertes Reflektorsystem



Kühles Licht

Strömungsgünstigkeit

Wartungsfreundlichkeit

Mach M2 F

Zusätzlich zu den Vorteilen der Mach M2:

Fokussierung



Optionen gegen Mehrpreis

Elektronische Helligkeits- regulierung

Die stufenlose Einstellung zwischen 50% und 100% erfolgt über eine Folientastatur am Leuchtenbügel. Ein Leuchtdioden-Display an der Folientastatur zeigt Ihnen die aktuelle Einstellung der Helligkeit.







Notfall-Halogenglühlampe

Fällt die Glühlampe im Einsatz aus, schwenkt die Notfall-Lampe automatisch in deren Position und übernimmt die Funktion.



ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
... we care about you ...

OP - LEUCHTEN

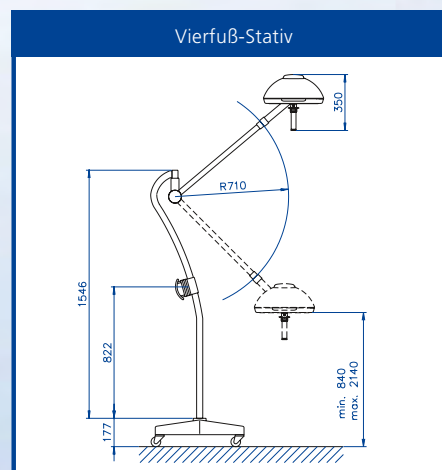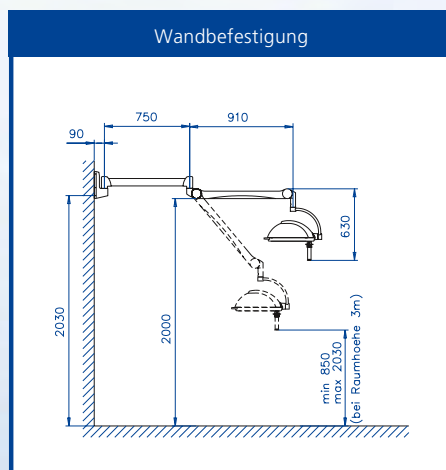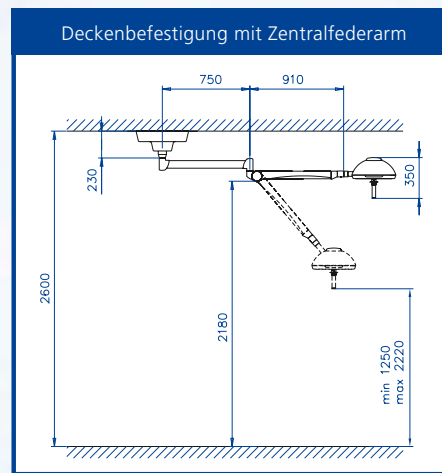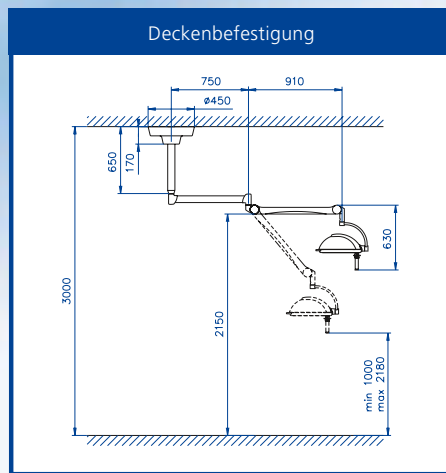

Maßangaben in Millimeter

Technische Daten		
Mach M2 Lichtsystem⁽¹⁾	Mach M2 F⁽²⁾	Mach M2⁽³⁾
Beleuchtungsstärke Lux in 1 Meter Abstand	90.000	60.000
Farbwiedergabeindex $R_a^{(4)}$ bei 4300 Kelvin	96	96
Farbwiedergabeindex $R_g^{(5)}$ bei 4300 Kelvin	≥ 90	≥ 90
Fokussierbare Leuchtfeldgröße (in cm)	14 - 28	18 (Fixfokus)
Farbtemperatur (Kelvin)	4300	4300
Elektronische Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper	Mehrpreis	Mehrpreis
Photometrisches Strahlungsäquivalent	280 lm/W	280 lm/W
Temperaturerhöhung im Kopfbereich	2° C	2° C
Leistungsaufnahme gesamt	80 W	80 W
Leuchtmittel Halogen IRC 22V / 80W	1	1
Notfalllampe Halogen IRC 22V / 80W	Mehrpreis	Mehrpreis
Arbeitsbereich (in cm)	70 - 140	70 - 140
Höhenverstellung (in cm)	118	118


- (1) Trafo extern
 (2) F-Modelle mit Fokussierung
 (3) Modelle mit Fixfokus
 (4) R_a ist ein Mittelwert aus R_1 = altrosa, R_2 = senfgelb, R_3 = gelbgrün, R_4 = hellgrün, R_5 = türkisblau, R_6 = himmelviolett, R_7 = asterviolett, R_8 = fliederviolett. Maximalwert = 100.
 (5) R_g ist der Wert für die Wiedergabe der Farbe rot. Dieser Index geht nicht in die Berechnung des allgemeinen Farbwiedergabeindex R_a ein. Bei dem herkömmlichen OP-Licht liegen die Werte üblicherweise zwischen 20 und 70. Maximalwert = 100. Werte über 90 bedeuten für den Chirurgen sichtbar bessere Detailerkennung im Wundfeld.



ECOMED MEDIZINTECHNIK GMBH
 ... we care about you ...

O P - L E U C H T E N

Vorteile

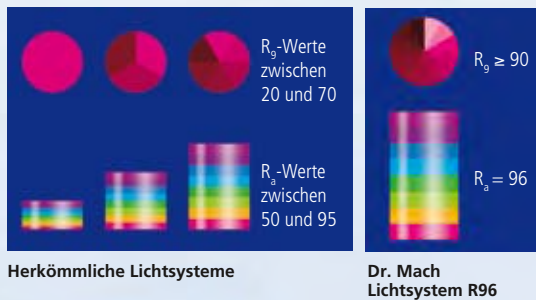

Lichteigenschaften und Optik

Überragende Farbwiedergabe



Mit bislang unerreichten Farbwiedergabewerten von $R_a = 96$ und $R_9(\text{rot}) \geq 90$ erkennen Sie mühelos feinste Farbnuancen im Gewebe. Um auch die unterschiedlichen Rottöne im Wundfeld erkennen zu können, ist die exakte Wiedergabe der Farbe „rot“ wesentlich. $R_9(\text{rot}) \geq 90$ bedeutet für den Chirurgen sichtbar bessere Detailerkennung. Das Farbspektrum des Wundfeldes erscheint natürlich und kontrastreich. Zudem wirkt das OP-Licht für das Auge spürbar angenehmer.

Fokussierung (optional)



Durch Drehung des Stellringes am sterilisierbaren Handgriff verschieben sich die Glühlampen im Reflektor. Der fokussierbare Lichtstrahl ermöglicht ein punktuelles Ausleuchten tiefster Wundkanäle mit hoher Lichtintensität sowie eine exakte Anpassung des Leuchtfeld-durchmessers an die jeweilige Wundgröße.

Zusätzlicher Komfort

Facettierte Reflektorsystem



Über 3000 Facetten je Reflektor garantieren ein homogenes Leuchtfeld und vermeiden störende Schattenbildungen im Leuchtfeld.

Kühles Licht



Beschichtete Kaltlichtreflektoren reduzieren in Verbindung mit dielektrisch beschichtetem Kaltlichtfilter die Wärmeabstrahlung auf ein Minimum. Die unerwünschten Infrarotstrahlen der Leuchtmittel werden durch die Reflektoren nicht reflektiert, sondern nach oben (zur Decke) abgestrahlt. Es bildet sich kein Wärmestau unter der OP-Leuchte. Der Kopfbereich des Chirurgen bleibt kühl.

Strömungsgünstigkeit



Die Gehäuseformen sind strömungsgünstig und bilden optimale Voraussetzungen für Laminar-Flow-Systeme (Klimadecken).

Wartungsfreundlichkeit



Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Leuchtgehäuse öffnen und Sie haben Zugang zu allen Systemkomponenten, die mittels Modultechnik problemlos ausgetauscht werden können. Innerhalb von 30 Sekunden wechseln Sie die Glühlampen. Die Gehäuse sind leicht zu reinigen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese allgemeinen Bedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte der ECOMED Medizintechnik GmbH. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen. Abweichungen gelten nur, sofern diese schriftlich von beiden Seiten anerkannt werden.

2. Vertragsabschluss

Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt hat. Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

Unsere Angebote sind hinsichtlich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend. Aufträge werden für uns erst durch schriftliche Bestätigung oder durch entsprechende Lieferung verbindlich.

3. Preise

Die Preise verstehen sich in Euro, exklusive Mehrwertsteuer und gelten ab Lager des Verkäufers. Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, beziehen sich die Preise auf die jeweils abgebildeten Artikel gemäß Beschreibung, nicht jedoch auf Inhalt, Zubehör und Dekoration der Abbildung. Der Transport wird durch den Verkäufer durchgeführt oder organisiert. Wenn im Zusammenhang der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Bei Preisänderungen, Irrtümern oder Abweichungen ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung des Auftrages zutage treten, wobei es hierfür keiner besonderen Mitteilung an den Käufer bedarf. Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen wird dem Käufer in Rechnung gestellt.

4. Lieferung

Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich und unverbindlich vereinbart werden können, werden schriftlich in der Auftragsbestätigung angeführt. Die Angabe eines Lieferzeitpunktes erfolgt nach bestem Ermessen und verlängert sich angemessen, wenn der Käufer erforderliche oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen verzögert oder unterlässt. Das Gleiche gilt bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers liegen, z.B. Lieferverzögerung eines Vorlieferanten, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoff- oder Energiemangel etc. Auch vom Käufer veranlasste Änderungen der gelieferten Waren führen zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferfrist. Ansprüche wegen Lieferverzögerung sind ausgeschlossen. Der Verkäufer verpflichtet sich zum Zeitpunkt der vereinbarten Abnahme der Lieferung zur Verfügung zu stehen.

Der Verkäufer ist berechtigt Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Lieferungen sind ab einem Warenwert je Bestellung von € 50,00 netto frei Haus, bei geringerem Warenwert wird eine Gebühr für Versand und Bearbeitung in der Höhe von € 8,00 zzgl. MwSt. in Rechnung gestellt. (ausgenommen sind sperrige Güter, Medizintechnische Geräte, Artikel der Gruppen Praxisausstattung, Möbel und Geräte, EDV und EDV Zubehör sowie Strahlenschutzlösungen, diese werden immer separat verrechnet).

5. Gefahrenübergang und Erfüllungsort

Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisstellung. Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt. Bei Leistungen ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird. Die Verpackung wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.

6. Zahlung

Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzüge auf ein Bankkonto des Verkäufers zu überweisen. Allfällige Spesen sind vom Käufer zu tragen. Andere Zahlungsvereinbarungen und Zahlungsmodalitäten bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Bei nicht fristgerechter Zahlung sind wir berechtigt Zinsen in Höhe von 9% per anno, sowie Mahnspesen in der Höhe von € 25,00 netto zu verrechnen. Inkassospesen gehen zu Lasten des Käufers. Der Verkäufer ist bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, berechtigt, die Kaufsache zur Sicherung seiner Ansprüche an sich zu nehmen.

Bei Neukunden oder Bestellungen mit einem Warenwert über € 500,00 behalten wir uns das Recht vor, nur gegen Vorauskasse, oder Anzahlung Aufträge entgegenzunehmen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

7. Gewährleistung

Der Käufer ist verpflichtet, die ihm gelieferte Ware unverzüglich zu überprüfen und Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen. Bei Kunden, die nicht Verbraucher sind, führt ein verspätetes Rügen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches. Ist die Mängelrüge berechtigt, so steht es ECOMED Medizintechnik GmbH frei, die Gewährleistungsansprüche des Käufers durch Verbesserung, Nachtrag des Fehlenden, Preisminderung, Austausch der mangelhaften Ware gegen eine mangelfreie zu erfüllen oder die Ware zurückzunehmen und den Kaufpreis zu refundieren. Gegenüber Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs 1 Z 2. KSchG hat ECOMED Medizintechnik GmbH

das Recht, Ansprüche auf Wandlung oder Preisminderung durch Austausch der mangelhaften Sache gegen eine mangelfreie abzuwehren und Preisminderungsansprüche im Übrigen durch Verbesserung oder Nachtrag des Fehlenden innerhalb angemessener Frist abzuwehren.

Für die während des Gewährleistungszeitraumes aufgetretenen Mängel wird ECOMED Medizintechnik GmbH dem Käufer weder das zur Mängelbehebung erforderliche Material noch die hierfür aufgewendete Arbeitszeit verrechnen.

Von der Gewährleistungspflicht nicht umfasst sind solche Schäden, die bei dem Käufer oder einem Dritten durch Abnutzung, ungewöhnliche äußere Einflüsse, durch Feuchtigkeit, Wärme oder Kälte entstanden sind. Von ihrer Gewährleistungspflicht ist ECOMED Medizintechnik GmbH des Weiteren befreit, wenn an den von ihr gelieferten Waren Änderungen, Bearbeitungen oder Versuche der Mängelbehebung durch den Käufer oder Dritte vorgenommen worden sind.

Die Mängelbehebung erfolgt nach Wahl von ECOMED Medizintechnik GmbH in ihren Geschäftsräumen oder am Aufstellungsort der Ware. Zur Vornahme der zur Mängelbehebung erforderlichen Leistungen hat der Käufer die Ware, sofern ECOMED Medizintechnik GmbH dies wünscht, an ECOMED Medizintechnik GmbH zurückzustellen. Die Verwendbarkeit bestellter Ware für bestimmte Zwecke des Bestellers ist nicht Vertragsbestandteil.

ECOMED Medizintechnik GmbH haftet gegenüber Kunden, die Unternehmer im Sinne des § 1 Abs 1 Z 1. KSchG sind, lediglich für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden und bloß bis zum Wert der von ECOMED Medizintechnik GmbH gelieferten Produkte.

8. Qualitätsangaben

Werden nicht bestimmte Eigenschaften bedungen, so liefert ECOMED Medizintechnik GmbH Erzeugnisse handelsüblicher Qualität. Qualitäts-, Maß- und Analysenangaben stellen Näherungswerte dar, die geringfügig über- oder unterschritten werden können. Solche Änderungen sind zu akzeptieren, wenn sie geringfügig, sachlich gerechtfertigt und daher zumutbar sind. Werden Eigenschaften der unter einer bestimmten Bezeichnung vertriebenen Ware verbessert (z.B. bei Nachfolgemodellen), so ist ECOMED Medizintechnik GmbH berechtigt, das geänderte Produkt zu liefern.

9. Haftung

Die Haftung beschränkt sich auf die Rücknahme nicht einwandfreier Artikel. Andere Ansprüche werden, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ausgeschlossen. Die Haftung des Verkäufers für andere Schäden als an der Kaufsache selber, für entgangenen Gewinn oder für sonstige Schäden, ist, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, auf die Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Verkäufers beschränkt.

10. Rückgabe/Umtausch

Die Rücktrittsfrist für Konsumenten im Sinne des KSchG (gilt nur für Personen die sich als Privatkunde registrieren) beträgt sieben Werktage. Sie beginnt bei Verträgen über die Lieferung von Waren mit dem Tag ihres Eingangs beim Verbraucher, bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Die Ware muss in der unbeschädigten Originalverpackung sein. Voraussetzung ist, dass die Ware nicht beschädigt oder erkennbar gebraucht ist, sowie die Rücksendung ausreichend frankiert erfolgt. Die Gefahr der Versendung, sowie dessen Nachweis liegen beim Kunden. Bei angefordertem Montageservice bzw. Demontage werden die Kosten nicht rückerstattet. Steril verpackte Produkte, Hygieneprodukte und Sonderanfertigungen, sowie Produkte die nach Kundenspezifikationen (z.B. Alle Arten von Liegen mit Kunstlederbezug nach Kundenwunsch) angefertigt werden, bzw. die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, sind generell von Rücknahme oder Umtausch ausgeschlossen.

11. Rücktritt vom Vertrag

Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers (ausgenommen Konsumenten gemäß KSchG) vom Vertrag ist ein Lieferverzug, der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist. Produkte die nach Kundenspezifikation (z.B. Alle Arten von Liegen mit Kunstlederbezug nach Kundenwunsch) angefertigt werden, sind generell nur aus Kulanzgründen zu stornieren und werden mit mind. 30% des Rechnungswertes in Rechnung gestellt. Der Rücktritt ist schriftlich und eingeschrieben geltend zu machen. Die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung von bestellten Artikeln trägt der Käufer. Sollten wir uns im Kulanzwege mit einer Rücknahme einverstanden erklären, steht uns eine Bearbeitungsgebühr von 15% des Warenwertes zu, mindestens jedoch € 25,00 netto. Ohne Zustimmung des Verkäufers zurückgesandte Ware wird unfrei retourniert.

12. Gerichtsstand

Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten - einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen - ist das sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in St. Pölten. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht.

13. Allgemeines

ECOMED Medizintechnik GmbH behält sich vor, die Geschäftsbedingungen ohne Nennung von Gründen zu ändern. Es gilt jeweils die bei Vertragsabschluss auf www.eco-med.co.at abrufbare aktuelle Fassung. Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel nahe kommt, zu ersetzen. Sofern in diesen AGB nicht anders vereinbart, gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs.

Stand Jänner 2016

CareLine - die Patientenliege
CareLine - der Patiententransporter
...auch für Eingriffsräume geeignet...

multifunktional – flexibel kombinierbar – einfache Handhabung – leicht zu reinigen
die neue Generation, die sich nach Ihren Anforderungen richtet
entwickelt und produziert in Österreich



Wir führen auch Iso-Behandlungswagen, Strahlenschutzlösungen, MRT-Zubehör,
Notfalltransporter, Spezialliegen und vieles mehr...



ECOMED Medizintechnik GmbH

Abt Maurus-Straße 35 · 3390 Melk / Österreich

Telefon: +43 680 12 4747 9 · Telefax: +43 1 34242 069256

office@ecomед.co.at · www.ecomed.co.at